

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ  
ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ  
«Тренажер психологический «Нева»**

## Содержание

1. Минимальные системные требования «Тренажер психологический «Нева».....3
2. Порядок установки программы «Тренажер психологический «Нева».....3

## 1. Системные требования

### Вне зависимости от минимальных и рекомендуемых требований:

- USB-флеш-накопитель с файлами установки программного обеспечения;
- USB-ключ (входит в комплект);
- периферийные устройства: клавиатура, мышь, звуковые колонки, монитор с соотношением сторон 16x9;
- наличие разъемов у ПК для подключения указанных устройств;
- видеокарта: совместимая с DirectX 11 с установленными последними драйверами;
- звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0с с установленными последними драйверами;
- ОС: Windows 7 и новее;
- .Net Framework 2.0 (для работы и установки программы).

### Минимальные системные требования:

- процессор: Intel Celeron J4125 / AMD Athlon Silver 3050U либо видеокарта: Radeon Vega 2 / Intel UHD Graphics 600 (от 2-х ГБ видеопамати);
- накопитель: HDD(от 5200 об/мин)/SSD от 2-х ГБ свободного места.

### Рекомендуемые :

- процессор: Intel Core i3-10110U /AMD Ryzen 3 3250U и выше;
- видеокарта: Radeon Vega 3 / Intel UHD Graphics 620 (от 4-х ГБ видеопамати);
- накопитель: SSD от 2-х ГБ свободного места.

## 2. Порядок установки

Для установки программы вставьте USB-флеш-накопитель с файлами в ваш компьютер, после этого появится окно установки. Если этого не произошло, запустите файл установки (файл в формате .exe в главной папке носителя (рис.1).

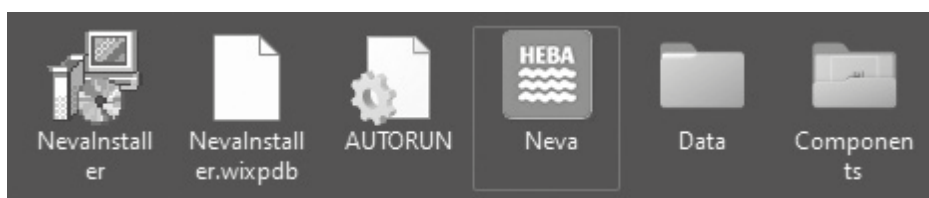


Рисунок 1. Пример .exe файла.

Далее следуйте инструкциям **Менеджера распаковки программы.**

В ходе установки менеджер автоматически запустит установку следующих компонентов:

- .Net Framework 4.5
- Microsoft Visual C++ 2017

### Процесс установки программы:



Рисунок 2. Стартовое окно установки.

Нажмите кнопку **Установить** (рис. 2).

Для корректной работы ПО необходимо нажать кнопку **Установить** для установки вспомогательных компонентов (рис. 3). Экран может быть автоматически пропущен, если необходимые компоненты уже установлены.

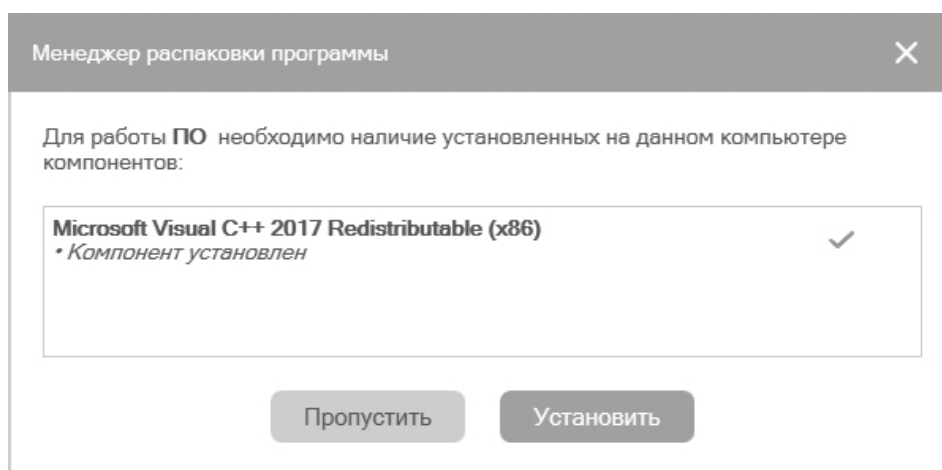


Рисунок 3. Установка вспомогательных компонентов.

По завершению установки компонента, если он потребует перезагрузку ПК, нужно отказаться от перезагрузки и перезагрузить ПК самостоятельно только после завершения установки программы.

Папку установки можно изменить, нажав кнопку **Обзор**. Продолжить установку программы можно, нажав кнопку **Продолжить** (рис. 4).

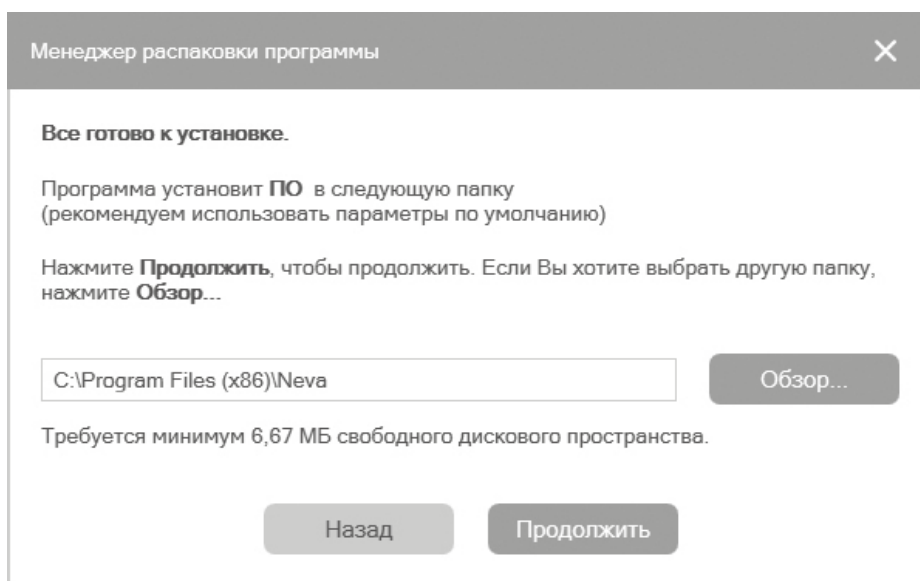


Рисунок 4. Выбор папки установки программы.

Нажмите кнопку **Установить** для запуска процесса установки (рис. 5).

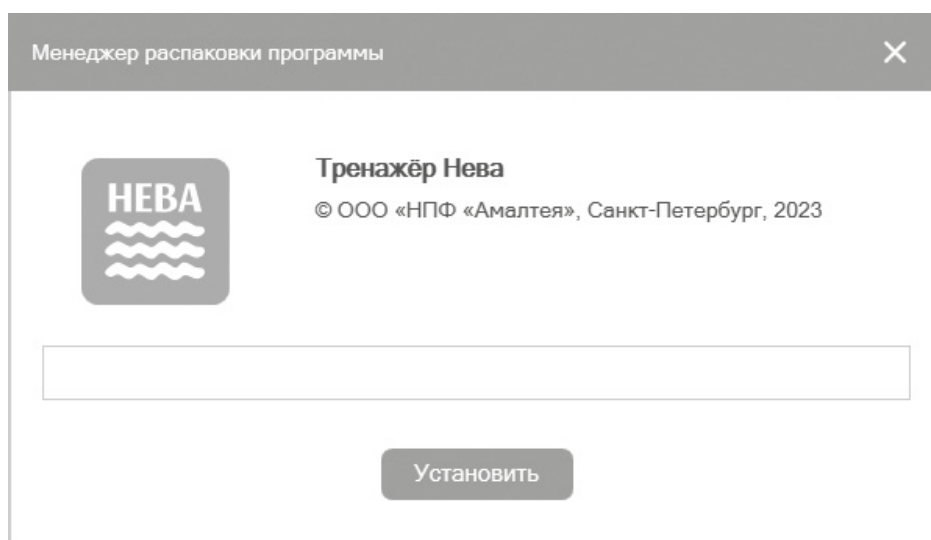


Рисунок 5. Шкала прогресса установки.

В появившемся окне выберите желаемые действия из списка и нажмите кнопку **Продолжить** (рис. 6).

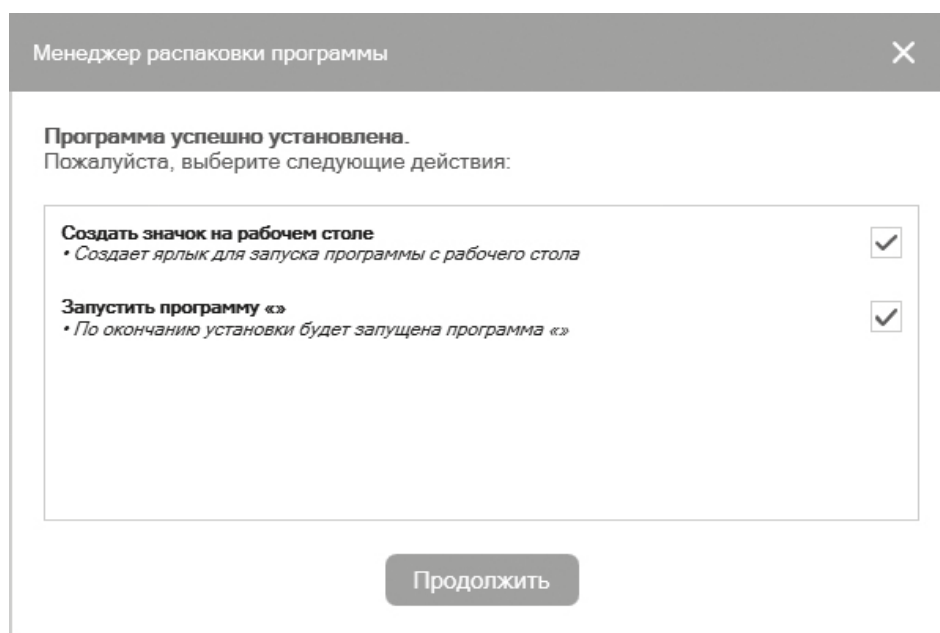


Рисунок 6. Выбор действий после установки.

После нажатия кнопки **Готово** менеджер распаковки завершит работу (рис.7).


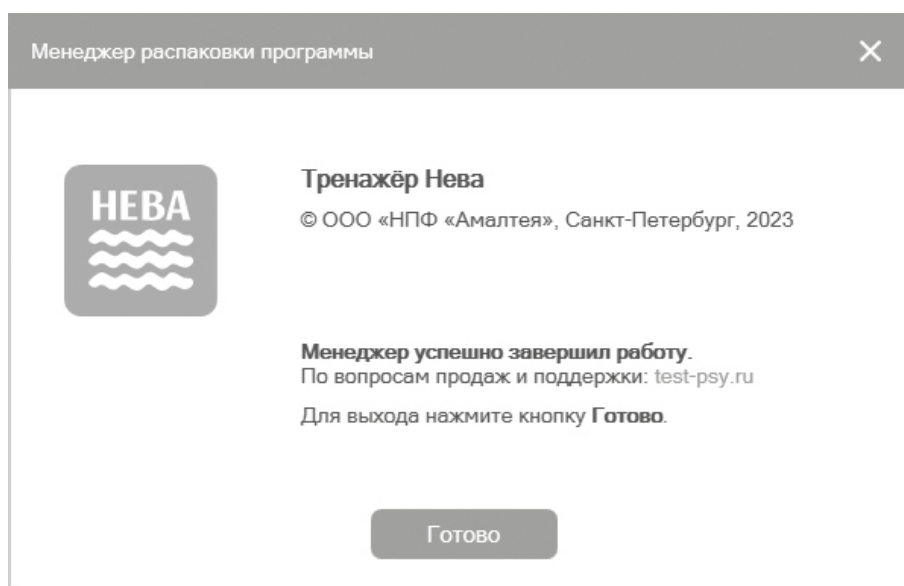


Рисунок 7. Завершение установки.


Если ПО уже было установлено, то откроется окно с кнопками **Удалить ПО** или **Установить компоненты** (рис. 8).

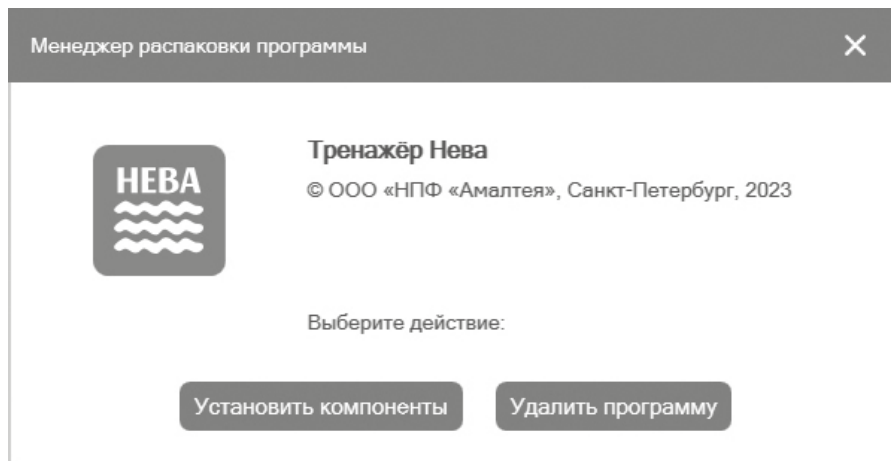

*Рисунок 8. Экран установки/удаления программы.*

Установленная программа работает только при наличии оригинального USB-ключа, вставленного в USB-порт.

Для подключения прибора вставьте провод USB (1, рис. 9) в соответствующий порт вашего компьютера.

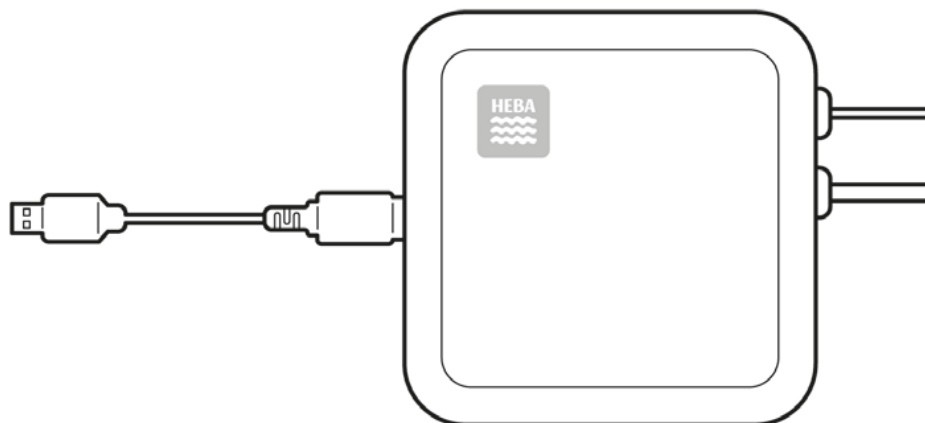

*Рисунок 9. Подключение прибора к компьютеру.*